

Expertenfeedback zu Biotrue® ONEday

Aus der Praxis für die Praxis



DEUTSCHLAND


BAUSCH+LOMB

Expertenfeedback zu Biotrue® ONEday

aus Deutschland



Praxiserfahrungen und Meinungen zu Biotrue® ONEday:

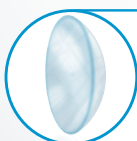

Material

Sehleistung



Benetzung

Anpassung





Ole Ruchel

Contactlinsen Ruchel, Kiel

„Sehr guter und auch bei langer Tragezeit gleichbleibender Tragekomfort“

Als die neueste Hydrogel-Generation mit hoher Sauerstoffdurchlässigkeit und einem UV-Filter über die gesamte Produktfamilie hebt sich die Biotrue® ONEday von anderen Kontaktlinsen ab. Die Linse bietet ein komplettes Portfolio mit torischer und multifokaler Variante, Tragekomfort, gutes Handling der Kontaktlinsen bei gleichzeitig geringem Modulus und sehr gute Sehqualität.

Die Benetzungseigenschaften der Biotrue® ONEday haben uns sehr überzeugt: Der Großteil unserer Kunden berichtet von einem **sehr guten und auch bei langer Tragezeit gleichbleibenden Tragekomfort**. Trotz hohem Wassergehalt scheinen die Linsen nur wenig auszutrocknen, was auch eine konstante Sehqualität über die gesamte Tragedauer unterstützt. Durch ihre guten Eigenschaften bezüglich Austrocknung und Benetzbarkeit bietet die Biotrue® hohen Tragekomfort auch bei langer PC-Arbeit. etc.


Die Linsen haben eine angenehme Haptik und neigen nicht zum Verkleben, wie es oft bei Tageslinsen der Fall ist. **Das Handling bzw. das Ein- und Aussetzen der Kontaktlinsen fällt den Kunden daher oftmals deutlich leichter**. Ansonsten ist die Biotrue® ONEday eine sehr gute Mischung aus gut verträglichem Hydrogel und gleichzeitig vergleichsweise hoher Sauerstoffdurchlässigkeit.

Zudem konnten wir eine sehr gute und lang anhaltende Sehqualität mit den Biotrue® Kontaktlinsen feststellen. Auch bekannte Probleme wie das Verutschen/Verdrehen der Kontaktlinsen bei sehr trockenen Augen oder „Halos“ bei Dunkelheit kommen vergleichsweise sehr selten vor. Die Kontaktlinsen bleiben auch bei langer Tragezeit gut benetzbar und halten ihre Form.

Die torische Biotrue® liefert zusätzlich eine sehr gute und vor allem konstante Stabilisierung. Der Grund dafür ist sicherlich, dass die

Biotrue® die altbewährten Vorteile einer prismatischen Stabilisierung in verbesserter Form nutzt. Vor allem bei Zusatz- oder Folgeversorgungen erleichtert dies auch die Anpassung der Kontaktlinsen. Oftmals lassen sich dort die Achslagen eins zu eins auf die Biotrue® übertragen.

Ansonsten **ist die unten aufgebrachte Linsenmarkierung sehr gut sichtbar und ermöglicht eine einfache Messung der Stabilisierung**.

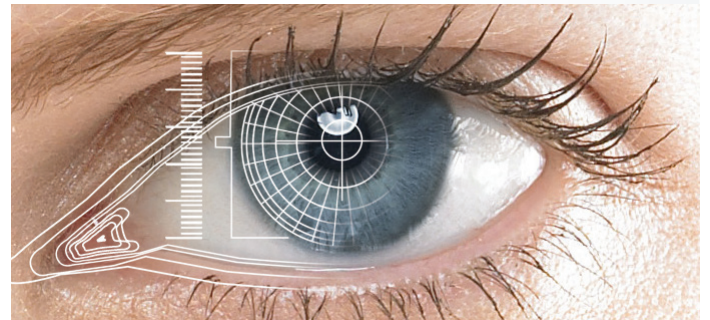

Auch mit der Biotrue® ONEday for Presbyopia waren die Kunden meist sehr zufrieden. Vorteil ist in jedem Fall, dass die multifokale Optik der Biotrue® der Optik der PureVision®2 multi bzw. der Ultra® multi gleicht, dadurch ist eine Folge- bzw. Zusatzversorgung zu diesen Kontaktlinsen sehr einfach.

Mein Tipp: Lassen Sie den Kunden einfach die Biotrue® ONEday als Zusatzprodukt ausprobieren. Das komplette Portfolio der Linse bietet die Möglichkeit, mit nur einem Linsentyp einen Großteil der Fehlsichtigkeiten zu korrigieren.

Preislich liegt die Biotrue® zudem aktuell für den Endverbraucher im günstigen Preissegment bei einer gleichzeitig guten Marge.

Insgesamt halte ich die Biotrue® ONEday für ein sehr gut gelungenes Produkt. Der gute Tragekomfort gepaart mit einer vergleichsweise hohen Sauerstoffdurchlässigkeit macht die Linse zu einer guten Wahl für eine große Zahl von Versorgungsungen.



Moritz Schwär

Schwär Brillen - Kontaktlinsen, Freiburg

„100 % positives Kundenfeedback bezüglich der Sehqualität“

Wer einmal den Komfort der Biotrue® ONEday erfahren hat, muss dank der breiten Angebotspalette (toric/multifocal) nie mehr auf den tollen Komfort verzichten. Biotrue® ONEday Kontaktlinsen bieten auch bei Stärkenänderungen Menschen in allen Lebensabschnitten die Möglichkeit, gelegentlich, auch ohne Brille scharf sehen zu können – und zwar in allen Entfernungen.

Benetzungseigenschaften und Komfort sind auch nach längerem Tragen als sehr gut zu bewerten. Allerdings Sorge ich als verantwortungsvoller und kritischer Anpasser auch vorab dafür, dass die Linse zu den Gegebenheiten am Auge meiner Kundin/ meines Kunden passt. **Was die Sehqualität angeht, bekomme ich zu 100 % positives Feedback von meinen Kontaktlinsenträgern.**

Bei der Toric ist die Stabilisierung meist in 0°. **Die Anpassung ist sehr einfach durch verlässliche, reproduzierbare Stabilisation.** Bei der Multifocal ist die „Anpassung“ für den Anpasser, der weiß, was er tut, und sich über die Feinheiten in der Wahrnehmung unterschiedlicher Personengruppen bewusst ist, einfach.



Generell empfehle ich bei guter Bewegung der Kontaktlinse auf dem Auge eine maximale Tragedauer von 6–8 Stunden/Tag. So kann ich das Versprechen eines guten Tragekomforts problemlos einhalten und der Kunde weiß, dass es nicht der Kontaktlinse geschuldet ist, falls der Komfort nach einem sehr langen Tag doch einmal nachlässt. Zudem lege ich dem Kunden einen Tag Linsenpause pro Woche ans Herz, um sich langfristig die Möglichkeit, Kontaktlinsen tragen zu können, nicht zu verbauen. Ich als „Verkäufer“ habe hierdurch langfristig natürlich auch einen Vorteil, der sich aus der anhaltenden Zusammenarbeit ergibt.

Zu der Biotrue® ONEday greife ich meistens für gelegentliches Tragen beim Sport und für Outdooraktivitäten. Selbst wenn die Augen nicht so viel Tränenfilm produzieren, funktioniert sie dann noch einwandfrei. Bei normalen Tränenfilmverhältnissen funktionieren die Linsen, meiner Erfahrung nach, sogar in klimatisierten Räumen.

Biotrue® ONEday ist ein tolles Produkt, das sich dank erweiterter Stärkenpalette universell einsetzen lässt und den Kunden altersunabhängig bei seinen Aktivitäten begleiten kann. Eine kritische sowie fachgerechte Beurteilung des Kontaktlinsensitzes ist zwingend die Voraussetzung, damit die Kundin/der Kunde von den Vorteilen der Biotrue® ONEday optimal profitieren kann.





Mandy Lorenz

Brillenstudio Kaiser, Bodenwerder

„Sehr gutes Handling, einfache Anpassung“

Die Biotrue® ONEday hebt sich insbesondere durch längere komfortable Tragezeit und gutes Handling ab. Die Linsen sind etwas fester, dadurch gelingt das Auf- und Absetzen leichter. Durch das Material punktet sie mit guter Benetzung und hoher Formstabilität für eine Tageslinse. Die Spontanverträglichkeit ist relativ gut, auch bei den Mehrstärkenlinsen, zudem bietet sie nach längerer Tragezeit noch guten Tragekomfort und angenehmes Tragegefühl.



Die Anpassung ist sehr einfach. Die Linsen sind präzise gefertigt und die Werte lassen sich von Monatslinsen gut übernehmen. Bei der torischen Biotrue® ONEday funktioniert die Stabilisierung ausgesprochen gut, die Linsen bleiben sicher auf dem Auge, ohne sich zu verdrehen. Auch die multifokale Linse überzeugt durch die leichte Anpassung, manchmal muss man ein bisschen experimentieren, da auch Kunden unterschiedlich reagieren. Die Sicht in allen Entfernungen ist, ähnlich wie bei Monatslinsen, bei größeren Additionen schwieriger, aber für Einsteiger sehr leicht in Bezug auf die Gewöhnung.

Persönlich empfehle ich die Biotrue® ONEday bei sporadischem Linsentragen und bei regelmäßigem

Tragen, wenn der Kunde die Pflege lästig findet, sowie als Starter, wenn der Kunde erst mal ausprobieren möchte.

Mein Tipp für alle, die die Biotrue® ONEday erstmalig anpassen und damit ihren Kontaktlinsen-Umsatz steigern wollen: **Tatsächlich zur Anpassung benutzen, da das Handling besser als bei herkömmlichen Tageslinsen ist** und auch Anfänger gut damit zurechtkommen. Als Vorteil sollte man dann darstellen, dass bei der Biotrue® ONEday als Tageslinse der hohe Tragekomfort des Hydrogels vorhanden ist, man sie trotzdem nicht aufwendig pflegen muss und der Verlust einer Linse nicht so dramatisch ist, z. B. beim Schwimmen.

Zusammenfassend ist die Biotrue® ONEday eine Tageskontaktlinse, die durch das hochwertige Hydrogel-Material eine komfortable Alternative zur Monatslinse bietet. **Sie ist einfach in der Anpassung und durch die hohe Formstabilität des Materials auch für Einsteiger gut geeignet**, da man auch gut das Auf- und Absetzen erlernen kann. Durch die drei Linsentypen kann man auch fast jede Fehlsichtigkeit ausgleichen und dem Kunden verschiedene Lösungsmöglichkeiten anbieten.





Rebecca Brandt

Augenoptik S. Brandt, Berlin

„Außerordentliche Spontanverträglichkeit, hervorragende Benetzung“

Die Biotrue® ONEday zeichnet sich durch ihre außerordentliche Spontanverträglichkeit aus. Ich habe sehr viele Neukunden, die diese Linse hervorragend vertragen, aber auch sehr viele Umsteiger, die vorher schon gute Linsen hatten, aber sich noch wohler fühlten, als sie die Biotrue® ONEday ausprobiert haben.

Die Benetzung ist so gut wie bei allen Kunden hervorragend. Ich habe auch kaum einen Kunden gehabt, der gesagt hat, dass ihm die Linse schnell oder stark austrocknet. Ich habe vielen Skifahrern diese Linsen angepasst. Nach ihrem Urlaub sind sie zu mir gekommen und haben mir berichtet, dass das gute Tragegefühl den Tag über konstant geblieben ist. Wir haben viele junge Leute, die stets ein Auge auf ihr Handy haben. Diese meinen, dass die Sicht auf das Display konstant scharf bleibt. Auch bei PC-Arbeiten zeigt sich die Linse von ihrer besten Seite.



Die Sehqualität ist sehr gut. Die Kunden haben genauso einen guten Visus mit diesen Linsen wie mit ihrer Brille. **Aber das Wichtigste ist, dass die Sehqualität über den Tag stabil bleibt und nicht mit der Tragezeit abnimmt.**

Mit der Biotrue® ONEday for Presbyopia gab es noch eine zusätzliche Aufwertung dieses Materials. Man konnte problemlos Kunden, die keine multifokalen Monatslinsen mehr tragen wollten, auf diese Linse umstellen, ohne dass es zu Problemen kam. Dadurch, dass sie nach demselben Prinzip wie die PureVision® 2 Multifokal funktionieren, war eine 1:1-Umstellung ein garantierter Erfolg. Wie bei allen multifokalen Linsen ist die Sicht für Kunden bis zu einem Alter von 52 Jahren ohne Probleme. Ab höherer ADD, kann es dann doch zu Einschränkungen kommen, was aber nachvollziehbar ist. Gerade bei Multifokal-Kunden muss man sich darüber im Klaren sein, dass nicht jeder Kunde dafür geeignet ist.

Bei höherer ADD ist die Diskrepanz zwischen den Werten so hoch, dass man nie ein gestochen scharfes Bild haben wird. Manche Kunden können sich damit arrangieren und manche nicht. Aber das ist ja das Spannende an diesem Beruf. Jeder Mensch ist ein Individuum und muss auch als solches betrachtet werden. Ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, dass man den Kunden, der eigentlich eine höhere ADD braucht, bis zur mittleren Distanz korrigiert und den Rest mit einer Brille ausgleicht. **Bei multifokalen Linsen ist meine erste Wahl Bausch und Lomb und bei den Tageslinsen sowieso die Biotrue® ONEday for Presbyopia.**

Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sich nun endlich das torische Pendant dazugesellt. Zunächst war ich etwas skeptisch wegen der Basiskurve. Ich hatte die Befürchtung, dass sie eventuell bei den meisten Kunden zu fest sitzen wird. Aber der Außendienst hat mich über den Aufbau der Linse aufgeklärt und darüber, dass die Linse trotz der geringen Basiskurve gut sitzen wird. Als ich dann das erste Mal diese Linse bei einem Kunden angepasst habe, wurde diese Aussage bestätigt. Die Linse saß sehr gut und nicht zu fest, aber angenehm für den Kunden.

Was ich an der Linse zusätzlich so toll finde, ist die Markierung der bestellten Achslagen. Meines Wissens hat das bis jetzt keine andere Firma, und ich finde es wünschenswert, dass dieses Prinzip auf andere Linsen übertragen wird. So ist es für uns Anpasser besser zu erkennen, ob die bestellten Achsen richtig sind und ob der Kunde die Linsen richtig aufgesetzt hat.

Wir haben mittlerweile eine gute Anzahl an Stammkunden der Biotrue® ONEday Linsen. Deswegen haben wir stets ein aufgefülltes Lager vor Ort. Dadurch ist es uns auch gelungen, dass Fremdkunden diese Linse ausprobiert haben und dann auf die Biotrue® ONEday umgeschwitten sind, egal ob Tages- oder Monatslinse. Auch wenn der Kunde im ersten Moment denkt, die Tageslinse wäre für den täglichen Gebrauch zu



teuer, sollten wir den Kunden dafür sensibilisieren, dass man zuerst an den Komfort und dann an das Portemonnaie denken sollte.

Auch bei Hobby- oder Urlaubslinsen-Trägern ist diese Linse sehr effektiv. Dadurch, dass die Biotrue® ONEday ein sehr gutes Tragegefühl und eine hohe Spontanverträglichkeit hat, ist es für die Brillenträger mit dieser Linse besser als mit anderen. Denn diese Kunden, die eigentlich die Linsen als unangenehm empfinden, haben mit der Biotrue® ONEday keine Probleme. Es ist sowieso zu empfehlen, bei jedem Brillenkauf den Kunden auch auf Kontaktlinsen anzusprechen. Und da wäre meine erste Wahl die Biotrue® ONEday!

Sie hat in jeder Hinsicht nur Vorteile: Benetzung, Sitz und Vielfalt sind einfach spitze!



Liselotte Jeske

Jeske Augenoptik, Veitshöchheim

„Gute Stabilisierung und einfache Anpassung bei der torischen Variante“

Tageslinsen frei von Silikon? Das unterscheidet die Biotrue® ONEday von anderen Kontaktlinsen! Durch die ausgezeichneten Benetzungseigenschaften finde ich sie gerade bei trockenen Augen empfehlenswert. Auch die Sehqualität würde ich als sehr gut bezeichnen. **Die Toric punktet zudem durch die gute Stabilisierung und einfache Anpassung.** Auch bei der Multifocal ist die Anpassung unkompliziert.

In meinem Geschäft findet die Tageslinse meist ihren Einsatz im Freizeitbereich, wobei ich grundsätzlich zur Biotrue® ONEday greifen würde. **Die Biotrue® ONEday überzeugt auf ganzer Linie: unkomplizierte Anpassung, hoher Tragekomfort und vor allem spontane Kundenzufriedenheit. Einfach selbst ausprobieren!**






Gerrit Schulz

Augenoptik Alexanderstraße, Oldenburg

„Linse für den digitalen Alltag, schnelle und unkomplizierte Anpassung bei der Multifokal“

Die Biotrue® ONEday hebt sich von anderen Kontaktlinsen vor allem durch die gute Spontanverträglichkeit ab. Die Benetzung ist sehr gut, auch mit der Sehqualität sind meine Kontaktlinsenträger sehr zufrieden. **Durch die sehr gute Benetzbarkeit bewährt sich die Linse auch im digitalen Alltag. Im Übrigen berichten unsere Kunden von einem sehr guten Sehen am Computer.**

Auch die torische und multifokale Variante der Biotrue® ONEday überzeugen. Die Stabilisierung der Biotrue® ONEday for Astigmatism ist toll. **Bei der Biotrue® ONEday for Presbyopia ist die Sicht oft schon mit der Auswahl der ersten Probelinse zufriedenstellend. Die Anpassung ist schnell und unkompliziert, wenn man sich an den Anpassleitfaden hält. Unsere Kunden sind positiv überrascht, dass auch das Sehen in den Zwischenbereichen (PC) sehr gut ist.**

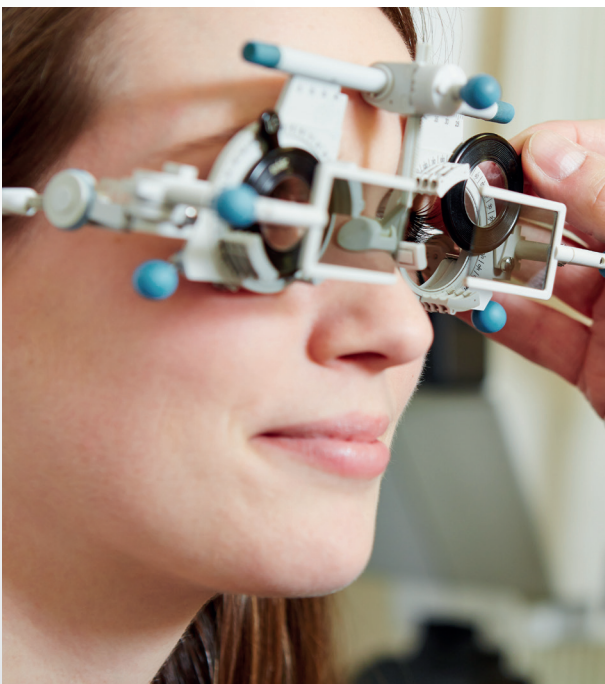

Ich greife bevorzugt zu der Biotrue® ONEday in Fällen, in denen unser Kunde sporadisch (Sport/ Freizeitgestaltung) Kontaktlinsen trägt oder täglich eine frische, sehr gut benetzende Kontaktlinse auf dem Auge haben möchte.

Wenn Sie die Biotrue® ONEday erstmal anpassen und damit Ihren Kontaktlinsen-Umsatz steigern wollen, empfehle ich einfach bei jedem Brillenverkauf das Thema Kontaktlinse anzusprechen: Insbesondere die Tageslinse ist häufig eine sehr gute Ergänzung, z. B. für Sporttreibende. Vorteil bei der Anpassung der Biotrue® ONEday ist das einfache Handling der Linse für den Kunden.

Zudem ist es eine wirklich sehr gut benetzende Kontaktlinse mit einer **hohen Spontanverträglichkeit zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.**





Eveline Paul

Opticus GbR, Berlin

„Klare Sicht auch bei langer PC-Arbeit“

Das Linsenmaterial der **Biotrue® ONEday kombiniert die besten Eigenschaften von Hydrogel- und Silikon-Hydrogel-Linsen ohne Silikonbestandteile**: sehr weiche und angenehme Spontanverträglichkeit, sehr guter und vor allem stabiler Tragekomfort, sehr geringe Dehydrierung auch nach 16 - 18 Stunden, dadurch ein angenehmes, weiches Tragegefühl (kein Fremdkörpergefühl), sehr gute Sauerstoffversorgung, sehr gute und stabile Benetzbarkeit; hervorragender Tragekomfort auch bei trockenen Augen.

Durch die geringe Austrocknung behält die Biotrue® ONEday während des gesamten Tragens ihre Form und die Oberfläche eine fast gleichbleibende Benetzbarkeit. Damit haben wir eine stabil hohe Sehqualität den gesamten Tag über. Durch die HD-Optik wird ein klares, kontrastreiches Sehen erreicht. Dies zeigt sich vorwiegend bei schlechten Lichtverhältnissen (z. B. Dunkelheit, Regen oder Nebel im Straßenverkehr).

Bei der torischen Variante ist die dünn auslaufende Randgestaltung ausschlaggebend für einen Tragekomfort vergleichbar mit dem einer sphärischen Linse. Trotzdem haben wir dank des Peri-Ballasts eine fast immer 270°-Stabilisierung (Strichmarkierung 270°). **Dieses ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung mit meist nur einer Anpasslinse.**



Die zusätzliche Markierung der Zylinderachse ermöglicht es, die Linse auch auf dem Auge zu identifizieren.

Die bewährte Gleitsichtgestaltung der Biotrue® ONE day for Presbyopia, wie auch bei der PureVision®, ermöglicht eine schon gewohnte Anpassungsstrategie. Wer mit dem Bausch & Lomb 3-Zonen-Progressive™-Design klarkommt, muss sich nicht umgewöhnen.

Die großen Vorteile im Vergleich mit allen am Markt verfügbaren Ein-Tages-Kontaktlinsen sind der sehr hohe Wassergehalt von 78 % und die sehr geringe Dehydrierungsneigung von nur 1,5 %. Diese Eigenschaften sorgen für ein **gleichbleibend gutes Tragegefühl vom Anfang bis zum Ende des Tages**. Dies schätzen vor allem die Neueinsteiger als spontan sehr angenehm ein. Aber auch bei unzufriedenen Linsenträgern schafft diese Linse schnell Zufriedenheit.

Durch den geringen Feuchtigkeitsverlust, die stabile Benetzung auch bei geringer Lidschlagfrequenz ist diese Linse **auch im digitalen Alltag wesentlich angenehmer als vergleichbare Tageslinsen. Die Linsenträger empfinden ein deutlich geringeres Fremdkörpergefühl und schätzen die klare Sicht auch bei langer PC-Arbeit.** Bei Nachkontrollen zum Ende des Arbeitstages waren weniger gereizte oder gerötete Augen feststellbar.

Da die Biotrue® ONEday alle Bereiche sowohl sphärisch, torisch als auch multifokal abdeckt, das Material super angenehmen Tragekomfort gewährleistet und **das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt**, ist die Biotrue® ONEday ideal als erste Linse geeignet. Allerdings ist entscheidend, dass auch ein vollständiger Anpasssatz vor Ort ist. Bei der Anpassung kann man eigentlich nichts falsch machen, man muss sich nur trauen!



Dana Delle Donne

Stratmann hören & sehen, Frankfurt am Main

„Brillante Sehqualität, toll abgestimmtes Werbepaket“

Die Biotrue® ONEday unterscheidet sich von anderen Kontaktlinsen durch ihre sehr guten Abbildungseigenschaften und den hohen Tragekomfort. Die Benetzungseigenschaften haben sich als sehr gut erwiesen, **die Sehqualität wird sogar als brillant beschrieben.**

Die Anpassung der torischen Biotrue® ONEday ist zudem sehr einfach, da sie durch die sehr gute Stabilisierung meist auf Anrieb passt. Auch die multifokale Variante ist an sich gut, jedoch fehlt hier manchmal der Mittelweg bei der Addition. Ein Zwischenschritt medium wäre dann schön.



Andreas Srugies

der optiker, Düsseldorf

„Sehr einfaches Handling, kompetente Beratung“

Die Biotrue® Kontaktlinse ist eine hervorragende, komfortable Linse, die besonders bei Einsteigern zu einer hohen Erfolgsrate führt. Auch bei empfindlichen Augen ist eine sehr gute Spontanverträglichkeit zu verzeichnen. **Durch die Materialstärke und die leichte Tönung sowie die gut zu erkennenden Markierungen (toric) ist das Handling zudem sehr benutzerfreundlich.** Bedingt durch das Linsenmaterial und durch einen dem der Hornhaut ähnlichen Wassergehalt ist ein längeres Tragen auch im digitalen Alltag (trotz verminderter Lidschlagfrequenz bei konzentriertem Arbeiten) ohne Weiteres möglich.

Die Linse zeichnet sich durch gute, stabile Sehqualität aus. Gerade bei Biotrue® ONEday

Auch das Marketing ist top. Das gesamte Werbepaket ist toll abgestimmt. Und außerdem: Der Frosch kommt super an!

Wenn ich an die Situationen denke, in welchen ich die Biotrue® ONEday empfehle, sehe ich da keine Einschränkungen. Es ist ein gelungenes Gesamtpaket mit einer tollen Parametervielfalt, bei der man für jeden Anpassfall gerüstet ist.

Mein Tipp für andere Kontaktlinsenanpasser: Probiert sie einfach aus und vor allem: Bietet sie euren Kunden an!

for Astigmatismus sind die Randbereiche weniger wahrnehmbar als bei vergleichbaren Linsen. Darüber hinaus ist die Stabilisierung der Toric in der Regel sehr gut und durch die Gravuren auch leicht zu ermitteln. Auch die multifokale Biotrue® ONEday für Presbyopie überzeugt: Die Anpassung ist durch den Leitfaden schnell zu erlernen und in einem angemessenen Zeitrahmen leicht umzusetzen. Das Sehen in allen Entfernungen ist nach kurzer Eingewöhnungsphase komfortabel.

Meine Empfehlung an andere Kontaktlinsenanpasser: Halte dich an den Leitfaden und die ausgezeichnete, **kompetente telefonische Beratung**, die dir auch bei außergewöhnlichen Problemen jederzeit zur Verfügung steht. Und empfehle die Biotrue® ONEday.

Inspiziert von der Natur Ihrer Augen™

Biotrue® ONEday Ein-Tages-Kontaktlinsen




Andauernd hohe Feuchtigkeit für besonders komfortables Sehen



Modernes, leistungsstarkes Hydrogel-Material mit sehr guten Benetzungseigenschaften



Gleicher Wassergehalt wie die Hornhaut¹

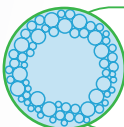


Sehr geringe Austrocknung - nur 1,5% in 16 Stunden²



Hoher Spontankomfort und angenehmes Kontaktlinsentragen



Klares und entspanntes Sehen den ganzen Tag, auch auf **digitalen Geräten** - dank der asphärischen Optik und geringer Austrocknung³

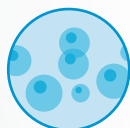

Hohe Sauerstoffversorgung



UV-Schutz



Einfache Handhabung

Biotrue® ONEday for Astigmatism

• Klare, stabile Sicht - durch das Peri-Ballast-Design⁴

Biotrue® ONEday for Presbyopia

• Klare und scharfe Sicht in allen Entfernungen - mit dem 3-Zonen-Progressive™-Design⁵



Die komplette Produktfamilie mit großer Parameter-Auswahl!



¹ Bergmanson, J., Clinical Ocular Anatomy and Physiology, 14th ed. Houston, Texas: Texas Eye Research and Technology Center, 2007. ² Bezieht sich auf die Tragezeit von 16 Stunden. Bausch & Lomb, Clinical evaluation of Biotrue™ ONEday, Rochester, NY, 2013, beziehbar über Bausch & Lomb GmbH, Berlin ³ Biotrue ONEday Ein-Tages-Kontaktlinsen wurden mit High-Definition-Optik entwickelt, um die sphärische Aberration entsprechend dem Bevölkerungsdurchschnitt von +0,18 zu reduzieren. (I. Cox, A. Kingston, A. Vogt, "Wavefront Aberrations of the Human Eye - A Large Population Sample", American Optometric Association, 2011) ⁴ Bausch & Lomb, interne Studie 828:15-003, 2015, beziehbar über Bausch & Lomb GmbH, Berlin ⁵ Die Analyse basiert auf Hartmann-Shack-Wellenfrontmessungen zur Bestimmung der Linsenstärke über die verschiedenen Linsenbereiche hinweg. Es wurden mehr als 6.000 Einzelmessungen in den zentralen 6 mm einer Kontaktlinse vorgenommen, wobei lokale Stärkemessungen als Funktion des radialen Abstands von der Linsenmitte dargestellt wurden. Bausch & Lomb, 2014

Die Biotrue® ONEday Familie ist komplett:

Verfügbar als sphärisch, multifokal und TORISCH

Material:	Nesofilcon A		
Material-Technologie:	Surface Active Technology™		
Wassergehalt:	78 %		
Mittendicke:	0,1 mm bei -3,00 dpt		
Modulus:	0,49 MPa		
Sauerstoffversorgung:	93 % Sauerstoff-Flux, 42 Dk/t @ MD -3,00 dpt		
Handlingstint:	Leicht blau		
UVA-/UVB-Schutz*:	Ja		
Biotrue® ONEday			
Basiskurve:	8,6 mm		
Durchmesser:	14,2 mm		
Lieferbereich Stärke:	+6,00 bis -9,00 dpt (ab -6,50 in 0,50 dpt Abst., kein Plan)		
Asphärische Optik:	Ja		
Packungsgrößen:	30er- und 90er-Packung/5er-Testpackung		
Biotrue® ONEday for ASTIGMATISM			
Stabilisierung:	Peri-Ballast		
Basiskurve:	8,4 mm		
Durchmesser:	14,5 mm		
Lieferbereich Stärke:	Lieferbereich zur Einführung		
	Stärken	Zylinder	Achsen
	Plan bis -4,25 dpt (in 0,25 dpt Abst.)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
	+0,25 dpt bis +4,00 dpt (in 0,25 dpt Abst.)	-0,75, -1,25, -1,75	20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°
	Vollständiger Lieferbereich ab Sommer 2018		
	Stärken	Zylinder	Achsen
	Plan bis -6,00 dpt (in 0,25 dpt Abst.)	-0,75, -1,25, -1,75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
	-6,50 dpt bis -9,00 dpt (in 0,50 dpt Abst.)		
	Plan bis -6,00 dpt (in 0,25 dpt Abst.)	-2,25	20°, 90°, 160°, 180°
	-6,50 dpt bis -9,00 dpt (in 0,50 dpt Abst.)		
	+0,25 dpt bis +4,00 dpt (in 0,25 dpt Abst.)	-0,75, -1,25, -1,75	20°, 70°, 90°, 110°, 160°, 180°
Linsenmarkierung:	Linsenmarkierung auf 6 Uhr	Achsenmarkierung variiert je nach Achse (Darstellung 160°)	
Asphärische Optik:	Ja		
Packungsgrößen:	30er-Packung/5er-Testpackung		
Biotrue® ONEday for PRESBYOPIA			
Linsendesign:	3-Zonen-Progressive™-Design		
Basiskurve:	8,6 mm		
Durchmesser:	14,2 mm		
Lieferbereich Stärke:	+ 6,00 bis -9,00 dpt (Abst. 0,25dpt) Low Addition: +0,75 dpt bis +1,50 dpt High Addition: +1,75 dpt bis +2,50 dpt		
Packungsgrößen:	30er- und 90er-Packung/5er-Testpackung		

* Unterstützt den Schutz der Hornhaut und des Auges vor schädlicher UV-Strahlung. WARNUNG: UV-absorbierende Kontaktlinsen sind kein Ersatz für schützenden UV-absorbierenden Augenschutz wie UV-absorbierende Schutzbrillen oder Sonnenbrillen, da nicht das gesamte Auge abgedeckt wird. Die Wirksamkeit des Tragens von UV-absorbierenden Kontaktlinsen zum Schutz oder zur Reduktion von Augenleiden, die mit UV-Licht assoziiert werden, ist bisher nicht untersucht worden. UV-absorbierender Augenschutz sollte, wie empfohlen, getragen werden. ANMERKUNG: Langfristige Aussetzung von UV-Strahlung gilt als ein Risikofaktor, der mit Katarakt assoziiert wird. Dies ist abhängig von einer Anzahl von Faktoren wie Umwelteinflüssen (Höhenlage, Geografie und Wolkendecke) und persönlichen Faktoren (Umfang und Art von Outdoor-Aktivitäten). UV-blockierende Kontaktlinsen unterstützen den Schutz gegen schädliche UV-Strahlung. Klinische Studien, die die Risikominimierung für Katarakt und andere Krankheiten beim Tragen von UV-blockierenden Kontaktlinsen demonstrieren, wurden bisher jedoch noch nicht durchgeführt.
© 2018 Bausch & Lomb Incorporated. ®/TM sind Handelsmarken von Bausch & Lomb Incorporated.